

CEREC

CEREC

CEREC

Kerámia betét (inlay/onlay)



A roncsolódás és a régi tömőanyag eltávolítása után...

Az egyedileg megmunkált kerámia betét tökéletesen illeszkedik.



Az eset súlyosságától függően, a teljes eljárás időtartama egy, max. két óra!

Teljes kerámia korona



A CEREC módszert alkalmazva a korona pótlása egyetlen kezelés alatt megoldható.

Nincs szükség lenyomatra, ideiglenes koronára – vagyis nincs szükség második vizitre!



A CEREC teljes kerámia koronával megelőzhető a fémallergia és szövődményei, emellett a legmagasabb esztétikai kívánalmaknak is megfelel.

Normális körülmények között a kezelés ideje 45-55 perc.

Héjkerámia



Az esztétikáját veszített és/vagy elszíneződött fogak helyrehozatala porcelán héjjal történik.

A fog preparációja után egy vékony porcelán réteggel leplezik le.



A tökéletes esztétika, és a tökéletes illeszkedés gyönyörűvé, természetessé teszi mosolyát - mindezt egyetlen fogászati kezelés alatt.

Miért éppen CEREC?

- ▶ Fémmentes
- ▶ Fogszínű
- ▶ Nincs szükség hagyományos lenyomatra, az optikai lenyomat 0,126 másodperc alatt készül el
- ▶ Nincs ideiglenes fogmű
- ▶ Minimális foganyag eltávolítás
- ▶ A blokkok fizikai tulajdonságai garantálják a hosszú élettartamot

sirona.
The Dental Company

GlobDent Kft.

Állunk rendelkezésére:



Van már választási lehetősége




Az erős és szép fogakért!

CEREC

Esztétikus kerámiapótlás lépésről lépésre

- ▶ A fogorvos eltávolítja a fog szúvas részét, kialakítva a betét üregét. A fogakra fűjt titán-oxid fényvisszaverő réteg előkészíti a kezelendő felületet a digitális felvételre.
- ▶ Egy infravörös kamera segítségével 3 dimenziós kép készül a preparációs felszínekről, közvetlenül a szájüregben.


1

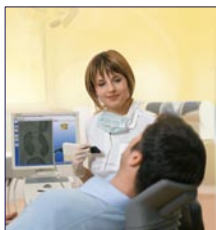

CEREC

- ▶ A fogorvos képernyőn szerkeszti meg a fogművet a CEREC 3D szoftver segítségével
- ▶ Ezután kiválasztja a megfelelő méretű és színű porcelán blokkot
- ▶ Gyémánt fejek esztergálják ki a megtervezett fogművet a nagy keménységű blokkból.

2

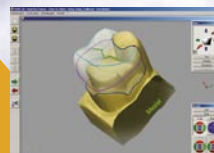

CEREC

- ▶ Az elkészült fogmű felületeit polírozással, illetve kémiai kondicionálással készítik elő a beragasztáshoz
- ▶ Egy speciális kettős kötésű fogszínű ragasztó anyaggal egyesítik a porcelánt a foggal
- ▶ A ragasztott szélek polírozásával a fogmű megkapja végeleges formáját.

3

